

Importante:


- Para utilizar este equipo es requisito indispensable haber realizado previamente la capacitación en el manejo del mismo, con la persona autorizada.
- Para utilizar el equipo es indispensable haber realizado la reserva en el calendario correspondiente.
- Regístrese en la planilla de uso del equipo.
- Ante cualquier duda consulte a la persona autorizada.
- Para obtener información adicional puede acceder a los manuales del equipo e información suplementaria en Google Drive: SoftMatter – Equipamiento LMB.
- Envíe los archivos de medida por mail, no inserte pen drives en la computadora del equipo.

Software

- Prender el equipo y luego abrir el software.
- Para utilizar el equipo en modo potenciostato abrir el software “Teq4Z_2016 VI 8HV_Eq1” ubicado en el escritorio.
- Para utilizar el equipo en modo bipotenciostato abrir el software “Bipot Teq4Z_Eq1” ubicado en el escritorio.
- Cuando solicite Usuario y Contraseña no es necesario completar los campos, directamente presione “Aceptar”.
- Las instrucciones para utilizar cada técnica se encuentran en el manual ([Google Drive: SoftMatter – Equipamiento LMB](#)).

Precauciones:

- Si al abrir el programa aparece el cartel “HV” (en color verde, en la esquina superior derecha) ir a “Config” y presionar “Booster Enable”. Asegurarse que desaparezca el cartel antes de comenzar la medida.

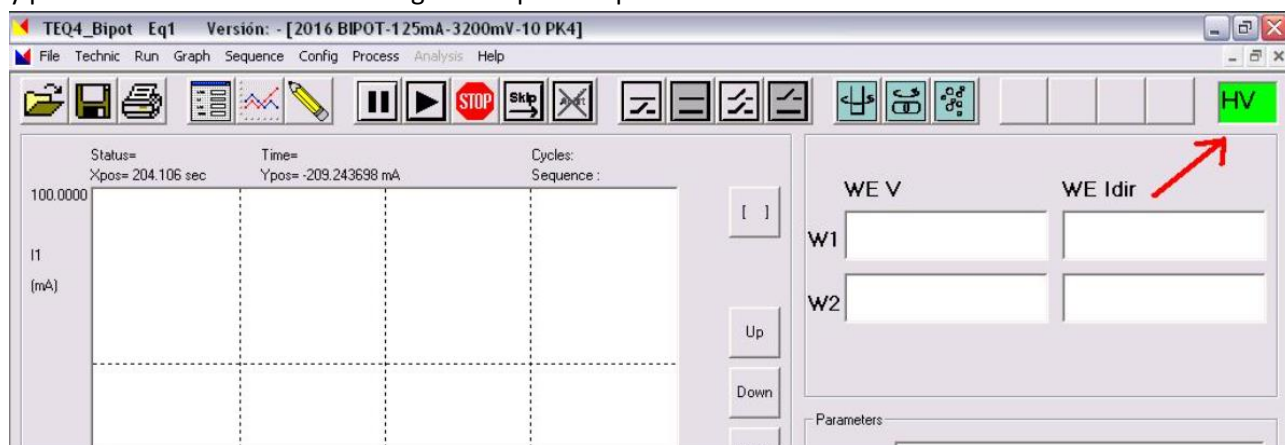

- No presionar la opción “Print”, “Print Color” o “Print BW” ya que aparecerá un error y será necesario reiniciar el programa, perdiéndose la última medida no guardada.

Guardado y exportación de datos

- Para salvar una medida en formato “.Teq4” presione “Save”. No podrá visualizar archivos grabados anteriormente mientras esté corriendo una medida.
- Para exportar los datos en formato “.txt” ir a: File→ Export y seleccionar las variables que se desean exportar (tensión, corriente, tiempo, etc.) y el tipo de separador de columnas requerido (“TAB”, “;”, “,”).